


# OPERATOR'S MANUAL 使用说明书 FLASHLIGHT

## NEXTORCH

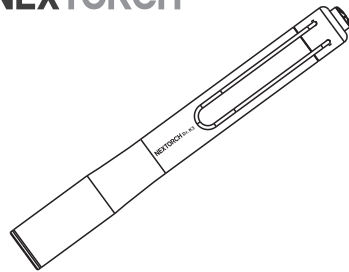

### DR.K3

Learn more on [www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)

#### English

Congratulations on purchasing our NEXTORCH® flashlight. You have chosen a high quality product designed from the latest technology. For the best use of this product, please read the instruction manual carefully.

#### ABOUT NEXTORCH

NEXTORCH Company was established in 2005, a company specializing in the research and development, manufacture and marketing of high end technologically advanced mobile lighting implements. The product range covers medium and high grade flashlights, head lamps, bicycle lights.

NEXTORCH has contributed to the development of the flashlight industry by serving as one of the 14 founding members of PLATO (Portable Lights American Trade Organization) and the voting member of the China Brand Name Flashlight Association, and contributing to the establishment and improvement of ANSI flashlight standards.

When you need a flashlight, a NEXTORCH flashlight will light things up! After ten years of inventions and improvement, requiring reliability of the product quality. NEXTORCH has become one of the leaders of the high end Chinese flashlight market, the leading brand in the European hunting products flashlight market, and among the best of the international name brand flashlight makers, selling to over one hundred countries and regions around the world!

#### ABOUT DR. K3

Dr. K3 is NEXTORCH's first medical flashlight specially targeted for the medical market. Crafted for use in health or medical cases, this flashlight gives high colour rendition and suitable colour temperature which close to the sunshine; The photobiological safety of lamps is RG0(risk group: exempt), without any harm to the eyes; The beam Provides full coverage without dark spots, avoiding mistakes in diagnosis. This 12cm flashlight is designed to fit the pocket of a lab coat, and a fashionable look.

#### SPECIFICATIONS

Bulb	LED
Ra	>90
CCT:	5000 K
Photobiological safety	RG0
Illuminance	950 LUX, 20 cm
Water proof	IPX-7, 1 m
runtime	15 h
battery	1×AAA

#### FEATURES

1. Colour rendition Ra>90, colour temperature approx. 5000 Kelvin, close to observe in the sunshine

请登录 [www.nextorch.com](http://www.nextorch.com) 获取更详尽的产品资讯。

#### 中文

尊敬的用户，恭喜您拥有了纳丽德手电。它选用最好的材料，经科学的设计，精密的制造工艺，呈现在您的面前。为了您能更方便地使用我们的产品，请仔细阅读我们为您准备的《使用说明书》。

#### 公司简介

纳丽德公司成立于2005年，是一家专业从事高品质移动照明工具的研发、制造和销售的高新技术企业，产品涵盖中高端手电、头灯、自行车灯等产品线。

纳丽德是美国PLATO（美国移动照明协会）14个首席成员之一及国内手电品牌唯一投票会员，参与制定和优化ANSI手电标准，推动手电行业的发展。

纳丽德手电，每当您需要的时候，它总能点亮！经过十年的创新发展，凭借可靠的产品品质，纳丽德目前已经成为国内高品质手电市场引领者，并跻身国际知名手电品牌前列，产品畅销全球100多个国家和地区！

#### 产品介绍

Dr.K3，纳丽德首款针对医用市场推出的便携式移动照明工具，旨在为从医工作者提供最完美的诊断时的照明效果。产品显色指数（Ra）大于90，色温（CCT）约5000K，接近太阳光下的观看效果，完美还原物体本身色泽；光生物危害等级RG0（豁免值），不对眼睛造成伤害；专业光学系统设计，光斑均匀无暗区，目标一目了然，避免误判。

#### 产品参数

光源	LED
显色指数（Ra）	>90
色温（CCT）	约5000K
光生物危害	RG0（豁免值）
光照度	950 LUX, 20 cm
防水等级	IPX-7, 水下1米
续航时间	15小时
电源	1.5V, 7号电池一节

#### 产品特点

1. 显色指数大于90，色温约5000K，接近太阳光下的观看效果；
2. 光生物危害等级RG0（豁免值），不对眼睛造成伤害，可放心对患者眼睛进行观察；
3. 专业光学系统设计，光斑均匀无暗区，目标一目了然；


2. Allow to clean or soak with alcohol
3. Photobiological safety of lamps RG0(risk group: exempt), without any harm to the eyes
4. The beam Provides full coverage without dark spots, avoiding mistakes in diagnosis

#### QUICK START GUIDE

##### • Battery Installation



##### • ON/OFF

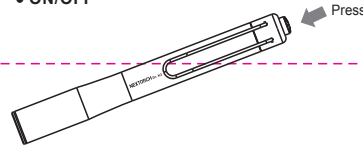

#### NOTICE

1. Please do not touch with reflector with rough cloths or wipes
2. Remove the batteries during long periods of disuse, to avoid leakage from the battery
3. Please do not remove the light bulb, to avoid harming the reflector cup or the light bulb

#### MAINTENANCE

To keep your flashlight in perfect working condition, follow the instructions below.

- (1) Clean your flashlight with a soft clean cloth.
- (2) Wash the flashlight with fresh water after using in the seawater or causticity liquid, and dry it with warm air.
- (3) When the tail cap does not rotate smoothly, apply silicone grease on the "O" ring (You can buy the silicon grease in outdoor or hardware shops.)
- (4) Please remove the battery and keep them dry and cool when they are not in use for an extended period of time period of time.

#### WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-days from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website ([www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also: Email us at [service@nextorch.com](mailto:service@nextorch.com) Call us: 0086-400-8300-799 OR contact your local dealer/distributor.



#### ON-LINE SERVICE

Please scan the following QR code, notify NEXTORCH, and we will assign an expert to assist you.



Product registration



Twitter



Facebook


4. 可用酒精清洗或浸泡；
5. 20厘米处照度950Lux，亮度适中，照明效果好；
6. 1节7号电池供电，最长续航15小时；
7. 12cm约普通钢笔长度，根据医生工作服口袋尺寸量身设计，携带方便，行走不晃动。

#### 快速入门

##### • 电池安装



##### • 打开/关闭

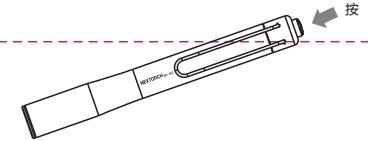

#### DR. K3安全使用指南

1. 请勿用粗糙的布料、纸巾等擦拭镜片；
2. 长时间不使用请将电池取出存放，以避免电池漏液
3. 请不要拆卸灯头，以免造成反光杯或灯泡损伤

#### DR. K3保养注意事项

每次使用后，请遵循以下几点对电筒进行必要的保养，使其能继续为您提供高质量的服务。

- (1) 每次使用后，请用干净的软布对电筒进行擦拭。
- (2) 当电筒在沾染海水或腐蚀性液体时，请及时用清水清洗，并用风吹风干。
- (3) 当灯头及尾盖转动不顺畅时，请在接口处涂少许硅脂。（您可以到专业的户外店、五金店购买到此类产品，或购买纳丽德为您准备的专业硅脂）
- (4) 电筒在不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存。

#### 售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级版或不低于原产品性能的其他产品；
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的前提下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内；
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费；
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描下方二维码在官网进行登记。发邮件至[service@nextorch.com](mailto:service@nextorch.com) 致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务；



#### 在线服务

请扫描下方二维码，关注纳丽德，我们将有专人为您解答并提供售后服务。



售后登记



官方微信



移动官网